

IUCLID5インストールマニュアル
Part 2
(必要ファイルの入手)

2008年2月15日

(社) 日本化学工業協会

2008/02/15

日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2

各社のUSER NAME, Pass Word,LEOXファイルが必要です。
初めてLEOXファイルを作成する場合には、Part 1からスタート
してください。各社で既にLEOXファイルを作られている場合には
その責任者にお問い合わせください。

Part 2はインターネットを介してのダウンロード操作が主になります。
所要時間は各社のネットワーク環境によります(回線の空いている時間を利用する等の工夫が必要な場合があるかもしれません)。

ダウンロードサイトへのアクセス



The screenshot shows the IUCLID 5 website interface. At the top right, there is a login form with fields for 'Username:' and 'Password:', a 'Login' button, and links for 'Sign-up new user' and 'Password recovery'. A red circle highlights the login form area. Below the login form is a navigation menu with links: 'Home', 'IUCLID 5 Project', 'Get IUCLID 5', 'Get Support', 'News', and 'About Us'. The main content area features the ECHA logo and a 'News' section with several articles dated from 2007, including 'Clarifications concerning License Agreement', 'The IUCLID Format (XML) is available', 'More than 1000 copies of IUCLID 5 downloaded!', and 'eChemPortal, the Global Portal to Information on Chemical Substances has been launched!'.

<http://ecbwbiu5.jrc.it/> にアクセスします。

右上のUser name、Pass欄にそれぞれ入力し、Loginをクリックします。これらの情報は各社の担当部門までお問い合わせください。

IUCLIDソフト本体の入手(2)



The screenshot shows the IUCLID 5 website interface. At the top, there is a header with the IUCLID 5 logo and the text "INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE". To the right of the logo, there is a user login area that says "Welcome katsurou matsuo (matsuo)" with a "Logout" link. Below the header, there is a navigation menu with links for "Home", "IUCLID 5 Project", "Get IUCLID 5", "Get Support", "News", and "About Us". The "Get IUCLID 5" link is highlighted. Below the navigation menu, there is a sub-menu with links for "User Info", "Download", "LEO Creation", and "Your LEOs". The "Download" link is highlighted. On the left side of the page, there is a sidebar with two links: "Stand-Alone versions" and "Distributed versions". The "Stand-Alone versions" link is highlighted. The main content area is titled "Download" and contains two sections: "Stand-Alone versions" and "Manual workstation installation package". The "Stand-Alone versions" section contains a link "Download the installation package >" which is circled in red. The "Manual workstation installation package" section contains a link "Download the installation package >".

2008/02/15 スタンドアロン版のダウンロード部分をクリックします。
日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2

IUCLID5ソフト本体の入手(3)

Welcome katsurou matsuo (matsuo)
[Logout](#)

English (en)

EUROPEAN COMMISSION Home IUCLID 5 Project **Get IUCLID 5** Get Support News About Us

User Info | [Download](#) | LEO Creation | Your LEOs

Be aware!
Not all possible IUCLID5 uses are covered by the standard License Agreement!

In the next screen you will see and accept the Standard License Agreement for the use of the IUCLID5 software. However, not all technically possible uses are covered by this standard License Agreement, and you are kindly requested to acknowledge that you are herewith been made aware of this.

I acknowledge

Next

I acknowledge にチェックを入れNEXTをクリックします。

2008/02/15

日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2

IUCLID5ソフト本体の入手(4)

The waiver by Licensor of one breach or default hereunder shall not constitute the waiver of any subsequent breach or default.

The headings given sections of this Agreement are solely for convenience or reference, and shall not be construed as having any bearing upon the interpretation or meaning of the provisions of this Agreement.

LICENSEE ACKNOWLEDGES TO HAVE READ, UNDERSTOOD AND AGREED TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT INDICATED ABOVE.

- I accept
- I am entitled to sign this License agreement

Cancel

Next

Please note that you can obtain a PDF version of this License Agreement from the "Get Support" >> "Documentation" Section of this web site.

画面を最下段までスクロールしてふたつのチェックボックスにチェックを入れNEXTをクリックします。
2008/02/15

日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2

IUCLID5ソフト本体の入手(5)

Step 5: Download (selected) Reference substances - optional, but recommended

As is the case with the EC Inventory, you will see that IUCLID will often ask you for "Reference substance" information. A Reference substance is a "label" to be attached to each of your substances in IUCLID. Each "Reference substance", in turn, features several data elements that unequivocally identify a substance. In order to make your work easier, the IUCLID team has prepared Reference substance data for tens of thousands of substances, and you can download one, several, or all of them and then import them into your IUCLID. Please go to [link](#) to select the Reference substance(s) you need, and to download them. Keep the downloaded files in a safe place like you did with the LEOX file, until you need to import them into your local IUCLID.

Note: By clicking the link a new window will open. Please close the window after you have finalised the download of the reference substances and return to this page to proceed to execute the download procedure.

Once you have gone through all five steps, you are ready to download and install IUCLID!

Yes, I have executed all five steps

Cancel

Next

画面を最下段までスクロールしてチェックボックスにチェックを入れNEXTをクリックします。

IUCLID5ソフト本体の入手(6)



INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE [English (en)]

EUROPEAN COMMISSION | Home | IUCLID 5 Project | **Get IUCLID 5** | Get Support | News | About Us

User Info | **Download** | LEO Creation | Your LEOs

Download - Stand-Alone versions

Setup Kit for Windows workstation - 12 JUNE 2007

This section contains the IUCLID 5 automated setup kit for a local PC running Microsoft Windows. The installation manual can be downloaded from the website at Get Support\Documentation

File size: 67.496 MByte


If you have read all the license agreement steps and the check list items, [please click here](#) to start the download.

Please click hereをクリックします。

2008/02/15

日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2

IUCLID5ソフトの入手(7)

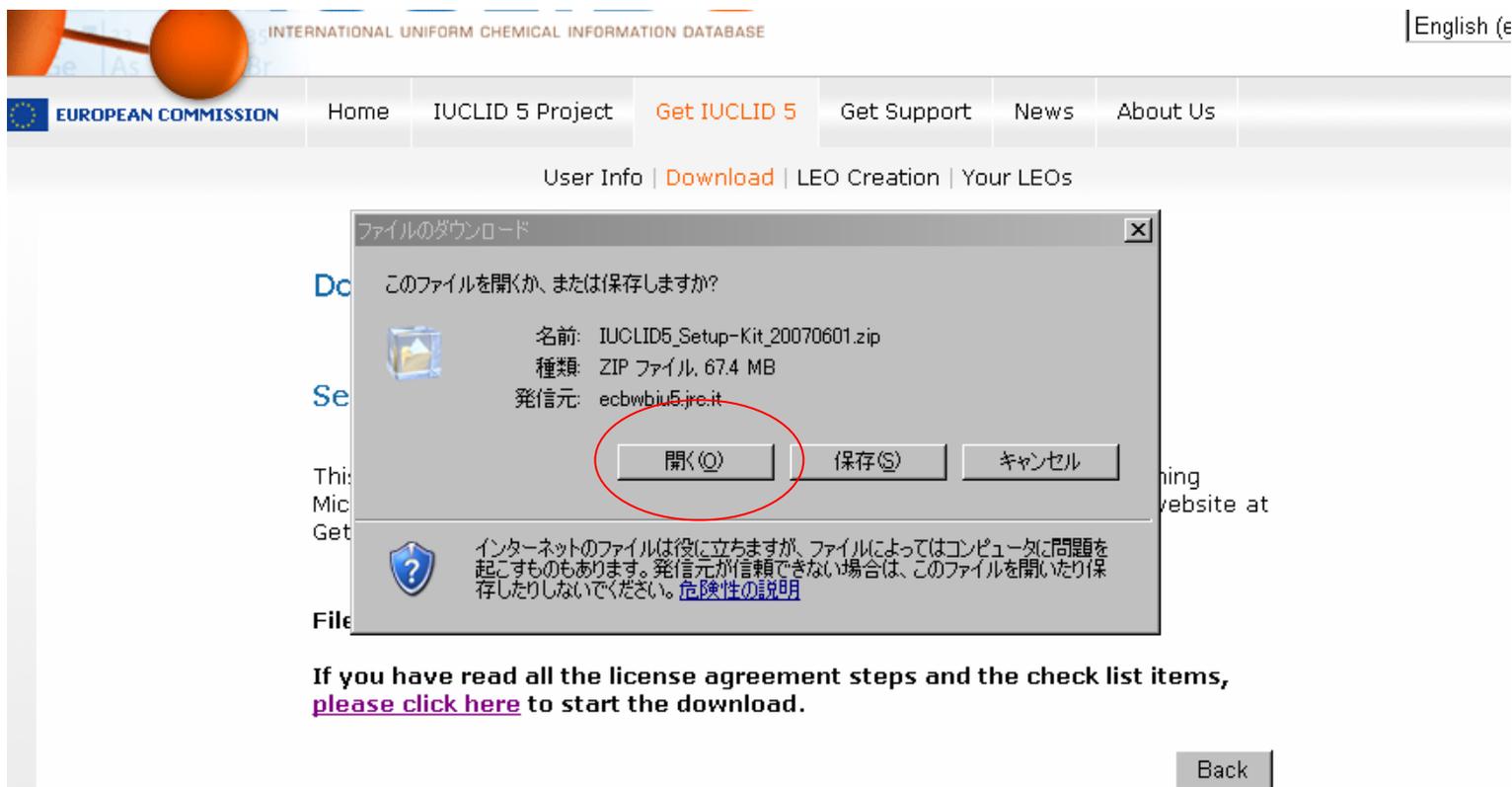

The screenshot shows the IUCLID5 website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, IUCLID 5 Project, Get IUCLID 5, Get Support, News, and About Us. Below this, there is a secondary navigation bar with links for User Info, Download, LEO Creation, and Your LEOs. The main content area displays a download dialog box titled 'ファイルのダウンロード' (File Download). The dialog box asks 'このファイルを開くか、または保存しますか?' (Do you want to open this file or save it?). The file details are: 名前: IUCLID5_Setup-Kit_20070601.zip, 種類: ZIP ファイル, 67.4 MB, 発信元: ecbwbju5.jrc.it. The '開く(O)' (Open) button is circled in red. Below the dialog box, there is a warning message: 'インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を起すものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保存したりしないでください。危険性の説明' (Internet files can be useful, but some files can cause problems on your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. See the risk statement). Below the warning, there is a link 'please click here' and a 'Back' button.

開く をクリック (ZIPファイルですのでしばし待機、自動解凍を待ちます)。66Mバイトありますのでしばらく時間がかかります。ソフト本体のダウンロードですので省略不可です。作業完了したら、デスクトップ上に解凍したフォルダー (IUCLID_Setup_Kit_20070601 という名称のフォルダー) ができていることを確認します。解凍されていない場合は解凍操作を行ってください。

LEOファイルの入手(1)



The screenshot shows the IUCLID 5 website interface. At the top left is the IUCLID 5 logo with the text 'INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE'. To the right, a user is logged in as 'katsurou matsuo (matsuo)' with a 'Logout' link. A language dropdown menu is set to 'English (en)'. The main navigation bar includes 'Home', 'IUCLID 5 Project', 'Get IUCLID 5', 'Get Support', 'News', and 'About Us'. Below this, a secondary navigation bar contains 'User Info', 'Download', 'LEO Creation', and 'Your LEOs', with 'Your LEOs' circled in red. The main content area is titled 'Download' and has two sub-sections: 'Stand-Alone versions' and 'Distributed versions'. Under 'Stand-Alone versions', there is a section for 'Setup Kit for Windows workstation' with a description and a link to 'Download the installation package >'. Below that is a section for 'Manual workstation installation package' with a description and another link to 'Download the installation package >'. At the bottom right of the content area, there is a text instruction: 'Get IUCLID5の Your LEOsをクリックします。'

2008/02/15

日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2

LEOファイルの入手(2)

The screenshot shows the IUCLID 5 user interface. At the top left is the IUCLID 5 logo with the text 'INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE'. To the right, a user is logged in as 'katsurou matsuo (matsuo)' with a 'Logout' link. A language dropdown menu is set to 'English (en)'. Below the logo is a navigation bar with links: 'Home', 'IUCLID 5 Project', 'Get IUCLID 5', 'Get Support', 'News', and 'About Us'. A secondary navigation bar contains 'User Info', 'Download', 'LEO Creation', and 'Your LEOs'. The main content area has a 'Welcome to IUCLID5' heading and a paragraph: 'In the restricted area you can manage your account information, download the IUCLID software or updated packages, create new Legal Entity Objects (LEOs) and browse through your previously created LEOs.' Below this are four links: 'User Info', 'Download', 'Create new LEO', and 'Your LEOs'. The 'Your LEOs' link is circled in red. At the bottom right, there is a 'Legal notice' link.

Your LEOsをクリックします。

2008/02/15

日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2

LEOファイルの入手(3)

Welcome katsuro matsuo (matsuo)
Logout

EUROPEAN COMMISSION Home IUCLID 5 Project Get IUCLID 5 Get Support News About Us

User Info | Download | LEO Creation | **Your LEOS**

Your LEOS

Legal entity Name	UUID	Country	Address	Edit	LEOX
Hit... p. Ltd.	IUC... b7-... 97... 9b...	Japan - JP		Edit	Download

ダウンロードをクリックしてデスクトップ等にダウンロードしてください(日本仕様のPCの場合、ファイルの所在が不明になりがちです。IUCLID5の活性化(4)の頁をご覧ください)。ダウンロードが完了してもファイルのアイコンが表示されない場合があります。この場合はマイドキュメント等に一旦保管してみてください。ファイル名称は Leox_101207031043.i5z といったものです。以上が終了したらGet Supportをクリックしてください。

注:LEOは会社の名称等を示すもので、IUCLID5の操作上重要です。LEOの情報の入ったファイルは上述のようにLEOXファイルと呼ばれます。インストールと活性化作業(後述します)が終わりましたら、各自PCの任意の場所に大事に保存してください。

2008/02/15

日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2

参照情報の入手(1)

The screenshot shows the IUCLID website interface. At the top, there is a navigation bar with the European Commission logo and links for Home, IUCLID 5 Project, Get IUCLID 5, Get Support, News, and About Us. Below this is a secondary navigation bar with links for Documentation, Training, Links, Get Reference substances, IUCLID format, FAQ, Service Desk Contact, and Get EC Inventory. The main content area is divided into two columns, each featuring a cartoon character and a section title. The left column includes sections for Documentation, Training, Links, and Get Reference substances. The right column includes sections for IUCLID Format, FAQ, Service Desk Contact, and Get EC Inventory. In both the 'Get Reference substances' and 'Get EC Inventory' sections, the 'Read more...' link is circled in red.

以下2ファイルを手に入れます(省略可能)。いずれも「ZIPファイルで「開く」を選択することで自動解凍されフォルダーがデスクトップに作成されます。

- ①Get Reference substances のRead Moreをクリックして参照物質の情報をダウンロードします。ファイルサイズは選択してダウンロード、小サイズ(22.7Mバイ)、フルサイズ(407Mバイト)があります。をとりあえず22.7Mバイトをデスクトップにダウンロードしましょう。
- ②Get SupportのGet EC Inventory をクリックしてインベントリー情報をデスクトップにダウンロードします。

2008/02/15

日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2

必要ファイルのコピー

以上の過程でダウンロードしたLEOXファイル、リファレンスサブスタンスファイル、ECインベントリファイルをデスクトップにコピーします。それぞれのフォルダーをあけ、「該当ファイルを右クリック」、「コピー」、「デスクトップ上で右クリック」、「貼り付け」を繰り返してください。以下の名称の3ファイルがデスクトップ上に存在することを確認してください。

Leox_101207031043.i5z	← 後半の番号が異なる場合があります。
reference_substances_light.i5z	← 小サイズの場合
ECInventory_en.i5z	

注: 日本語仕様のPCで後述の作業を行う場合に、上述3ファイルの存在場所が不明瞭となるケース(IUCLID5の活性化(4)の頁をご覧ください)があります。本作業はその混乱を避けるための作業です。

次のステップへ

以上で必要なファイルの入手は完了いたしました。次のステップが、IUCLID5のインストールと活性化です。

次のステップではファイルの結合操作を行います。PCの性能により時間がかかる場合があります。

謝辞

本資料の作成にご尽力いただいたREACH対応協議会REACH作業グループ
IUCLID班のメンバーの皆様に感謝いたします。(社) 日本化学工業協会

2008/02/15

日化協REACH作業部会IUCLID班
インストールマニュアル2